

Lipo-X

Introdúcere - Lipo-X
Triple Care Systemed
Cavítatie+ Radiofrecvența + Vacuum

Material Informativ

© Copyright by A.ESTETIQ PROFESSIONAL LINE
Toate drepturile rezervate



CAVI + RF + VACUUM

Triple Care Systemed

Cavitatie si RF + Vacuum,
Doua manere cu functii diferite, pentru o ingrijire corporala completa



Remodelare
corporala



Lifting



Fermitate



Circulatie



Linia
decolteului



Riduri fine





Zone Tratament - Corp

Elasticitatea pielii

Eliminarea grasimii

Circulatia sangelui

Celulita

Zona Tratament - Fata

Linii fine - frunte

Riduri fine

Pometi lasati

Pliul nazolabial

Riduri gat

CAVITATIE

Manipul cu cavitate LIPO-X foloseste ultrasunetele pentru a sparge grasimea si a o face usor de îndepartat

Manipul de cavitate foloseste ultrasunetele pentru a sparge grasimea si a o face usor de îndepartat. Lichidul poate parea ca umple spatiul, dar de fapt contine gaze. Daca presiunea asupra lichidului este instabila, gazul se aduna pe partea slaba si creeaza picaturi de aer, iar acest fenomen se numeste cavitate. Sii când presiunea e aplicata din nou asupra bulei, aceasta se rupe si erodeaza zona înconjuratoare cu o presiune puternica. Lipo-X foloseste acest fenomen pentru conturarea corpului.



...De fapt, cavitatia parea sa induca destabilizarea citoplasmei adipocitelor si a membranei plasmatiche care înveleste vacuola lipidica, posibil prin coalescenta veziculelor de pinocitoza sau generarea de clustere multiveziculare din membrana plasmatica. La rândul sau, acest fenomen determina rupturi focale ale citoplasmei adipocitelor, de aproximativ 0,5-1,5 μm în diametru, care permit scurgerea picaturilor de trigliceride din vacuola lipidica în spatiul extracelular... - *"Efecte histologice si ultrastructurale ale cavitatiei induse cu ultrasunete asupra pielii umane - Tesut adipos"*

Tratamentul prin cavitate va provoca scurgerea picaturilor de trigliceride din vacuola lipidica în spatiul extracelular. Puteti spune acest lucru imediat dupa un tratament, simtind tesutul moale care era tare înainte. Peste 1-3 zile, pe masura ce trigliceridele sunt eliminate din organism, are loc o reducere reala a dimensiunii si este foarte important sa promovam circulatia în aceasta perioada.



* Imaginea de mai jos arata Manipulul Lipo- X Cavitatie

	Timpul masuratorii		MD	% imbunatatire	Valoarea	Sig
	Medie Pre tratament $\pm \sigma$	Medie Post tratament $\pm \sigma$				
WC	107.22 $\pm$ 11.67	95.88 $\pm$ 8.43	11.33	10.57%	0.002*	S
Masuratori US	2.58 $\pm$ 0.24	1.9 $\pm$ 0.49	0.68	26.35%	0.0001*	S

Dupa cum este prezentat în tabelul (2), în comparatia grupului, testele de comparatie multiple pe perechi (teste post-hoc) au aratat ca a existat o reducere semnificativa a WC la post-tratament în comparatie cu pre-tratament (valoarea $P=0,002^*$). De asemenea, a existat o reducere semnificativa a masuratorilor US ale grosimii stratului de grasime subcutanata abdominala la post-tratament în comparatie cu pre-tratament (valoarea $P=0,0001^*$). - "Eficacitatea cavitatiei cu ultrasunete, a lipolizei tripolare cu radiofrecventa si a terapiei combinate asupra adipozitatii abdominale "


RF (= Radiofrecventa)

Manipulul LIPO-X RF genereaza caldura profunda endogena pentru liftingul pielii si conturarea corpului.

Frecventa înalta este curentul alternativ care poate genera EDH (caldura cutanata endogena). Utilizeaza principiile circulatiei electrice prin tesuturile vii (care functioneaza ca mediu rezistent) si creste temperatura, deoarece atunci când curentul de înalta frecventa (500 kHz cu RF DUO) patrunde în pielea profunda, moleculele de tesut vibreaza cu electronul urmând latimea de vibratie si genereaza caldura organica prin frecare reciproca.

Aceasta caldura nu numai ca atonizeaza tesuturile conjunctive pentru relaxarea muschilor si cresterea circulatiei sangelui, ci simuleaza si fibroblastele si modifica metabolismul adipocitelor pentru regenerarea pielii si reducerea grasimii locale.

Când o celula este încălzită, metabolismul acesteia crește sau este deteriorată și regenerată, rezultând diverse efecte de frumusețe în funcție de temperatura și locație. De exemplu, în stratul dermic, căldura promovează generarea de colagen și lipoliza în stratul subcutanat și, în general, crește circulația, facilitând furnizarea de nutriție și eliminarea deșeurilor.

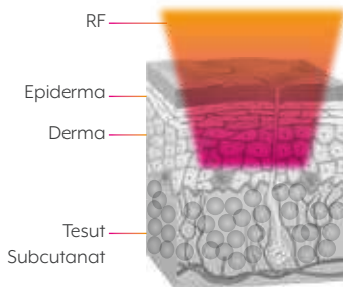

...De fapt, cavităția pare să inducă destabilizarea citoplasmei adipocitelor și a membranei plasmatică care învelește vacuola lipidică, posibil prin coalescența veziculelor de pinocitoză sau generarea de clustere multiveziculare din membrana plasmatică. La rândul său, acest fenomen determină rupturi focale ale citoplasmei adipocitelor, de aproximativ 0,5-1,5 μm în diametru, care permit scurgerea picăturilor de trigliceride din vacuola lipidică în spațiul extracelular... - "Efecte histologice și ultrastructurale ale cavității induse cu ultrasunete asupra pielii umane - Tesut adipos"



Zona ochilor, liniile de zâmbet de pe frunte, ameliorarea ridurilor gâtului și anti-îmbătrânire

Elimină ridurile și deșeurile prin circulația limfatică, circulația citosolului. Creează colagen, Pentru a întări pielea, elasticitatea.



Îndepărtarea punctelor negre, cicatricilor de acnee, sebumului din zona nasului și etc.

Normalizează glandele sebacee pentru a controla secreția de sebum, regenerarea pielii. Relaxează cicatricile post-acnee.



Efect de reducere prin îmbunătățirea elasticității pielii, tonificarea mușchilor feței cu noduri

Îmbunătățește elasticitatea pielii prin activarea regenerării celulare și tonificarea mușchilor feței.



Promovează dizolvarea grasimii corporale prin căldura profundă

Fără efect secundar sau durere. Este eficient pentru reducerea dimensiunii prin încălzirea celulelor grase și îmbunătățirea elasticității pielii.


DE CE CU VACCUM?

Manipulul LIPO-X RF functioneaza în combinatie cu functia de vaccum, pentru o caldura endogena mai profunda si o circulatie mai fluida a sângelui/limfei.

Masajul cu vaccum, cunoscut sub numele de endermologie, perturba unele dintre membranele adipocitelor si are ca rezultat îmbunatatirea celulei si reducerea circumferintei corpului. Cu toate acestea, deoarece necesita numeroase tratamente pentru a obtine un rezultat satisfactor, LIPO-X a combinat acest lucru cu radiofrecventa pentru actiune sinergica. Vaccumul ajuta energia de radiofrecventa sa patrunda mai adânc în tesut , iar radiofrecventa ajuta presiunea de vid sa perturbe membranele adipocitare


3 marimi de manipul cu RF

Lipo-X RF are trei marimi diferite de manipuli pentru zone diferite ale corpului.

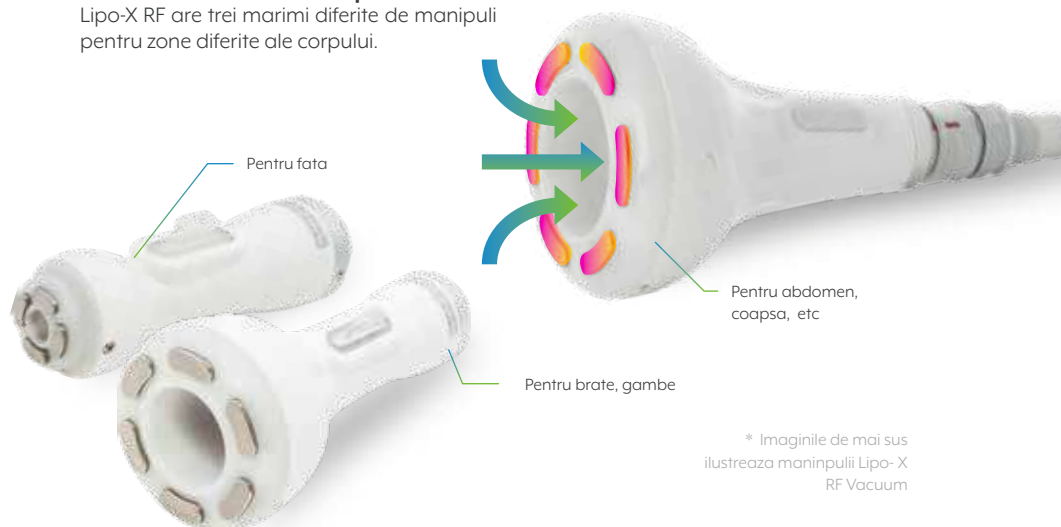

4 tipuri de vacuum si 9 trepte de putere vacuum

LIPO-X masaj vacuum cu diverse moduri de actiune

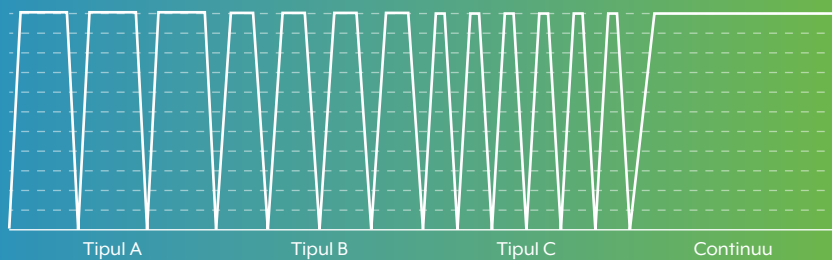

CAVITATIE

Sparge acumularile de grasime pentru a le face mai usor de eliminat



RF

Pentru liftingul pielii si conturul corporal



Vacuum

Efect de sinergie cu RF

Celulita

Piele de coaja de portocala

Indiferent de obezitate, exista o problema care afecteaza 90% dintre femei. Arata ca o punga uriasa plina cu brânza de vaci sau o portocala grav ranita si umflata. Aceasta, acoperind soldurile si coapsele, este ca un cosmar care nu se termina.




Gradul 0

Fara gropite chiar
si cu presiune



Gradul 1


Gropitele apar doar la
presiune

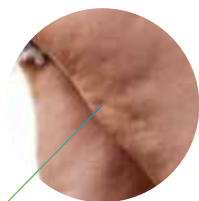

Gradul 2

Gropitele se vad în
pozitie din picioare


Senzatie de frig si poate exista durere.

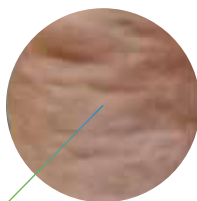

Gradul 3

Prezinta gropite chiar
si în pozitia culcat


*Întregul picior se simte greu, amortit si rece.
Greu de diferentiat o gropita, deoarece sunt
puternic îmbinate.*

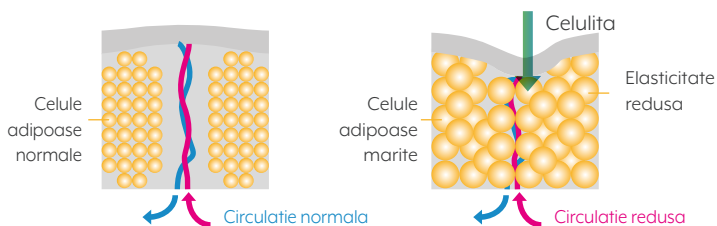

Celulita este adesea confundata cu mase de grasime, dar adevarul este ca grasimea si deseurile din jur sunt solidificate si grupate, denaturate si se modifica similar cu celulele fibrelor. Prin urmare, celulita, care a început sa se aglomereze, este greu de îndepărtat cu controlul dietei, chiar se degradeaza. Oamenii aleg de obicei masaj, crema de slăbit, terapie medicamentoasa etc. Cu toate acestea, acestea sunt în mare parte temporare sau nu sunt optime pentru celulita. LIPO-X rupe membrana celulelor adipoase cu cavitatie, topeste celulele adipoase cu RF, stimuleaza circulatia limfatic cu masaj cu vacuum.


Ca rezultat, nodurile cu denivelari scad si nu se refac, pe masura ce se distrug si se îndeparteaza.

Inainte & Dupa

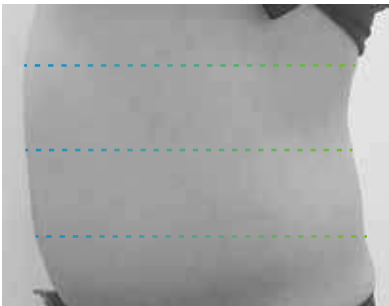


Masuratori initiale
(cm)

94.1
96.1

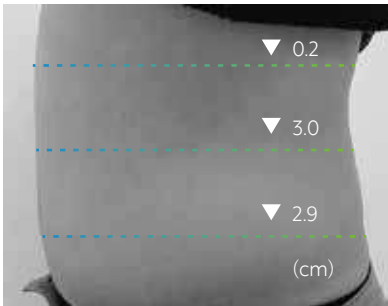


Dupa 5 Sedinte (cm)

93.9
93.1
97.5

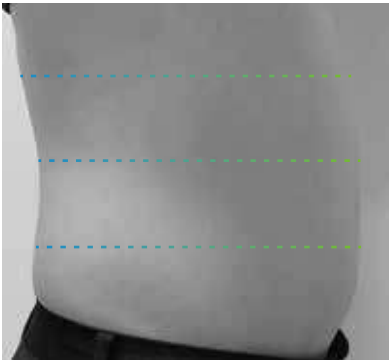

Masuratori initiale
(cm)


90.2

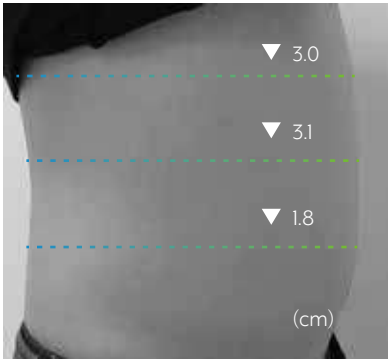

Dupa 9 Sedinte (cm)


87.2
86.7
89.8

Inainte & Dupa

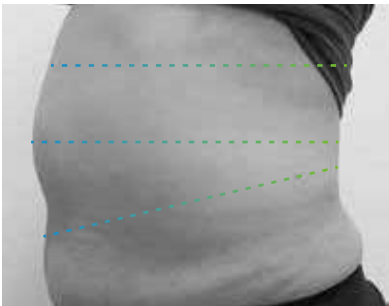


Masuratori initiale
(cm)

94.4
98.5

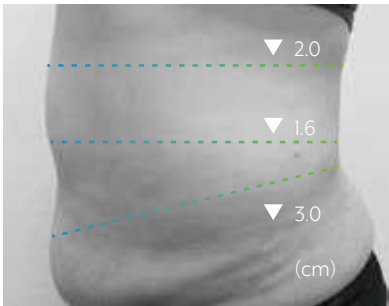


Dupa 9 Sedinte (cm)

92.4
96.9
99.0

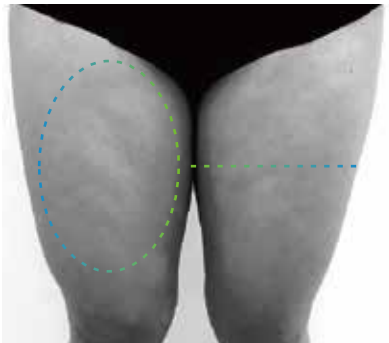

Masuratori initiale
(cm)


56.5 / 55.7

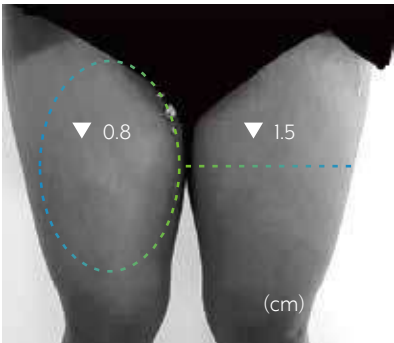

Dupa 1 Sedinta (cm)

55.7 / 54.2

Specificatii

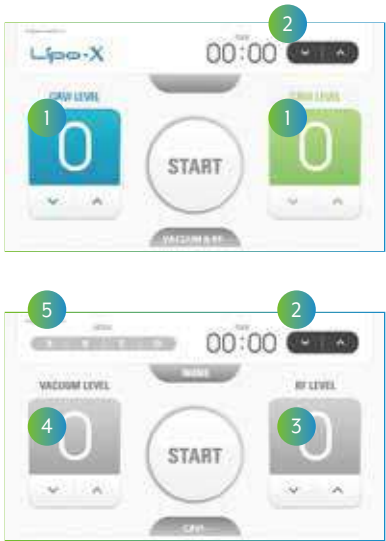

Numar	Nume	Explicatie
1	Nivel cavitate	Nivele 1~10
2	Timp	Maxim 30 minute
3	Nivel RF	Nivele 1~9
4	Nivel Vacuum	Nivele 1~9
5	Mod Selectie (Vacuum)	A, B, C, D

LÍPO-X

AQUASURE^{H2}



VEGAN RECIPE
BUENO BIO Co., Ltd.

